

準備

①手指消毒し、手袋を着用する


②検体ボトルのゴム栓部分をアルコール綿で消毒する



終了後

⑨手袋を脱ぎ、手指消毒をする

⑧駆血帯を処理する

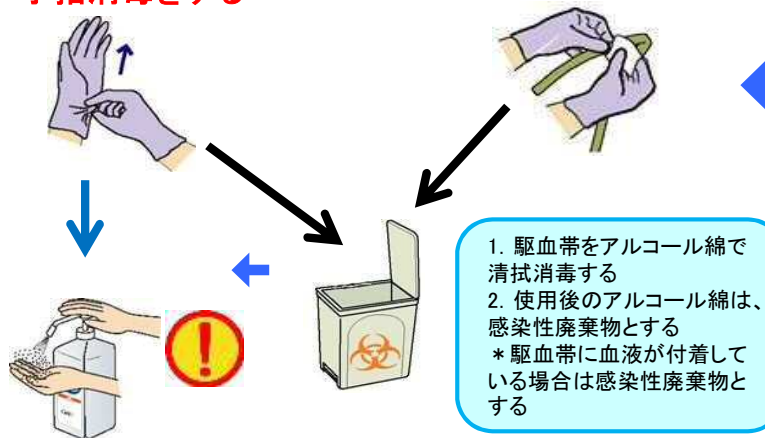


採血→分注




③穿刺部位を消毒する

1. アルコール綿

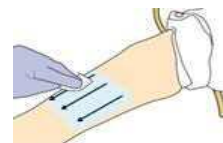


皮脂、汚れを取り除く

2. グルコン酸クロロヘキシジン含有アルコール綿棒

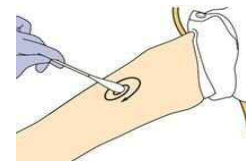

同心円状に消毒し、消毒後、十分に乾燥させる

④駆血後、穿刺する

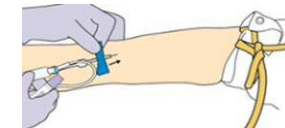

穿刺部位に触れない



⑦注射針と注射器を廃棄する



注射針と注射器は、分解せずに廃棄する


⑥検体ボトルに分注する



1. 赤(嫌気性ボトル)
2. 青(好気性ボトル)
の順番で、各検体に5~10ml分注する

分注時、針刺し切創に注意する

⑤抜針し、止血する

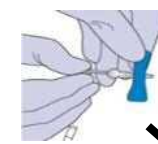

安全機能を作動させて抜針する



止血する

